




Cabinet per reagenti chimici LABOSAFE PRO da 600 2 vani e 2 ante

Codice prodotto:
WP45032B-2D (apertura destra) – WP45032B-2S (apertura sinistra)

En 16121 – En 16122
(Test severità 2)

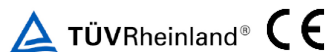


Dimensioni (L x P x H in mm)		Specifiche	
Esterne	600 x 500 x 2020	Volume interno (litri)	378
Interne	560 x 425/450 x 1560	Peso (Kg)	90

- Struttura completamente smontabile, costruita con pannelli di agglomerato ligneo realizzati al 100% con materiale riciclato attraverso un processo produttivo di qualità certificata denominato Pannello Ecologico, nobilitato con rivestimento melaminico colore bianco.
- Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009: B-s1, d0 e classe E1 emissione di formaldeide.
- Zoccolo inferiore metallico con piedini di regolazione per la messa in bolla.
- Componenti metalliche verniciate con polveri poliuretaniche anticorrosione.
- N.2 ante, apertura 270°, serratura con chiave pieghevole di sicurezza (safety key).
- Vano dedicato allo stoccaggio “ACIDI” e vano dedicato allo stoccaggio “BASI”.
- Dotazione interna, per ogni vano:
 - N.1 vassoio metallico centrale, con perni di sostegno, regolabile in altezza, portata cad. 30 Kg, capacità di contenimento cad. 5 litri.
 - N.1 vasca metallica di fondo alla base del vano, portata cad. 30 Kg, capacità di contenimento cad. 10 litri.
 - Illuminazione interna mediante LED a tutta altezza, accensione automatica all’apertura dell’anta.
- Vano tecnico superiore, separato dal vano di stoccaggio, equipaggiato con:
 - Carter frontale metallico, apribile per accesso al vano tecnico.
 - Controller digitale con le seguenti funzioni:
 - Funzione per l’aumento dell’aspirazione all’apertura dell’anta.
 - Allarme “porte aperte” con tasto per la tacitazione.
 - Tasto “Stand By” con spia di presenza tensione.
 - Presa seriale per configurazione/setup.
 - Indicazioni per manutenzione, assistenza service e sostituzione filtro.
 - Convogliatore (interno) di aspirazione vano, provvisto di cella filtrante a carboni attivi.
 - Raccordo di espulsione superiore \varnothing 100mm.
 - Elettroaspiratore interno (opzionale) 220 V / 50 Hz – 29 W.
 - Cavo con spina schuko, per collegamento alla linea elettrica.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in ottemperanza alle normative vigenti.
- Portata aria espulsa: minima 25 m³/h – massima 150 m³/h.
- Manuale d’uso e manutenzione.
- Dispositivo di protezione collettiva secondo D.Lgs 81/2008 (se canalizzato con espulsione esterna).

Cabinet per reagenti chimici LABOSAFE PRO da 600 2 vani e 2 ante

misure 600 x 500 x 2020 mm

WP45032B-2S (apertura sinistra)

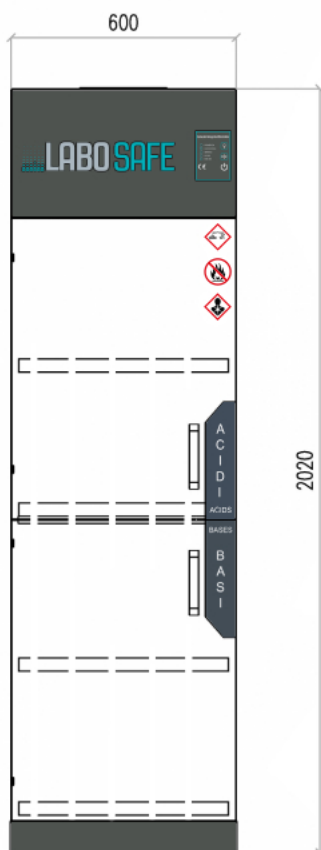

WP45032B-2D (apertura destra)

