


Cabinet per reagenti chimici LABOSAFE PRO da 900 1 vano e 2 ante



Codice prodotto:
WP45033B

En 16121 – En 16122
(Test severità 2)

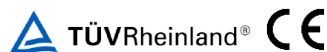

| Dimensioni (L x P x H in mm) | | Specifiche | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-----|
| Esterne | 900 x 500 x 2020 | Volume interno (litri) | 573 |
| Interne | 864 x 425/450 x 1560 | Peso (Kg) | 125 |

- Struttura completamente smontabile, costruita con pannelli di agglomerato ligneo realizzati al 100% con materiale riciclato attraverso un processo produttivo di qualità certificata denominato Pannello Ecologico, nobilitato con rivestimento melaminico colore bianco.
- Euroclasse di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009: B-s1, d0 e classe E1 emissione di formaldeide.
- Zoccolo inferiore metallico con piedini di regolazione per la messa in bolla.
- Componenti metalliche verniciate con polveri poliuretaniche anticorrosione.
- Ante con tripla cerniera, apertura 270°, serratura con chiave pieghevole di sicurezza (safety key).
- Vano unico dedicato allo stoccaggio di "ACIDI" e "BASI".
- Dotazione interna:
 - N.2 vassoi metallici, con perni di sostegno, regolabili in altezza, portata cad. 30 Kg, capacità di contenimento cad. 9 litri.
 - N.2 vasche di fondo alla base del vano e sul ripiano centrale (fisso), portata cad. 30 Kg, capacità di contenimento cad. 9 litri.
 - Illuminazione interna mediante LED a tutta altezza, accensione automatica all'apertura dell'anta.
- Vano tecnico superiore, separato dal vano di stoccaggio, equipaggiato con:
 - Carter frontale metallico, apribile per accesso al vano tecnico.
 - Controller digitale con le seguenti funzioni:
 - Funzione per l'aumento dell'aspirazione all'apertura dell'anta.
 - Allarme "porte aperte" con tasto per la tacitazione.
 - Tasto "Stand By" con spia di presenza tensione.
 - Presa seriale per configurazione/setup.
 - Indicazioni per manutenzione, assistenza service e sostituzione filtro.
 - Convogliatore (interno) di aspirazione vano, provvisto di cella filtrante a carboni attivi.
 - Raccordo di espulsione superiore \varnothing 100mm.
 - Elettroaspiratore interno (opzionale) 220 V / 50 Hz – 29 W.
 - Cavo con spina schuko, per collegamento alla linea elettrica.
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti corrosivi, nocivi e tossici in ottemperanza alle normative vigenti.
- Portata aria espulsa: minima 25 m³/h – massima 150 m³/h.
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Dispositivo di protezione collettiva secondo D.Lgs 81/2008 (se canalizzato con espulsione esterna).

Cabinet per reagenti chimici LABOSAFE PRO da 900 1 vano e 2 ante

misure 900 x 500 x 2020 mm

